Eine Ressource. Mehrere Technologien.




coaxmed

ONE

Integration und Technologie

Außergewöhnliche Bedienung durch die Integration eines hochmodernen technologischen Baukastensystems mit Geräten von nachgewiesener klinischer Wirksamkeit, die in der Lage sind, Unreinheiten im Gesicht und am Körper zu behandeln.

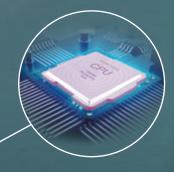

EINZIGARTIGE TECHNOLOGISCHE INNOVATIONEN

Biotec Italia-Plattformen stellen ein neues Konzept vor, das auf dem neuesten Hard- und Softwaredesign basiert. Unser Forschungs- und Entwicklungsteam entwickelt Hardware-Lösungen der nächsten Generation für die Hightech- und Hochleistungsmedizin, die eine ständige Systemaktualisierung ermöglichen, um das Problem der Technologieveralterung zu beseitigen. Maximale kraft und Leistung sind garantiert.

Der TissueActive®-Modus bleibt erhalten Vaskularisation der Haut.

TissueActive

Erhält die Vaskularisierung des Gewebes dank der Synergie der Coolfrequency® und Vacupulse® Technologien.

Coolfrequency


Stimuliert den intra und extrazellulären lonenaustausch, was die korrekte Funktionalität der Zellen ermöglicht und zur Beseitigung des Effekts der Eisblockade" im behandelten Gewebeabschnitt beiträgt.

Vacupulse

Aktiver Sog, der die Ablösung des Gewebes verursacht und den Widerstand und die Elastizität des Bindegewebes modifiziert, indem das Gewebe un die Mikrozirculation in Bewegung gehalten wird.

cryoliposculpt

Kryolipolyse Entwicklung für die medizinische Behandlung der Körperkonturierung.

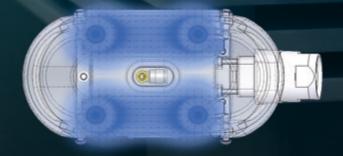

Thermische Überwachung

Sie überwacht ständig die erreichte Temperatur auf der Haut , indem sie die Daten auf dem Monitor meldet und so sichere und reproduzierbare Protokolle gewährleistet.

• Gleichmäßige Kühlung

Schnelle Aufnahme von Kälte und hohe Wärmeaustauschkapazität durch die Ergonomie des Applikators sorgt für eine stabile und gleichmäßige Temperatur bis zu -10°C.

Doppelter Applikator

Möglichkeit, zwei Bereiche mit unterschiedlicher Adipositas in der gleichen Sitzung zu behandeln.

Flexi® Mehrere Technologien.

DUOSHAPE®

• 3Density® Moduliert automatisch die Feldfrequenz , um die Tiefe des Eindringens von Wärmeenergie in der Haut, von 200 kHz bis 600 kHz zu varieren.

• Exklusive gleichzeitige Emission von hochintensiver Radiofrequenz und leistungsstarkem 28 kHz Ultraschallgenerator, der durch den Kavitationseffekt die Fettzellmembranen schädigt.

• PerfectTune Technologie kühlt den Ultraschall Wandler mit aktivem Wasserdurchfluss , der die Stabilität bewahrt und den Wirkungsgrad garantiert.



SKINTITE®

 Kombination aus rhythmischem Vakuum, Microneedling und Radiofrequenz zur Induktion der dermalen Koagulation.

• Erhitzt die tiefere Dermis um 360 Grad um jede Mikronadelspitze herum und erzeugt eine Kollagenstraffung und Synthese.

> Sterile Einweg-Mehrnadelelektrode von 0,25 mm bis 2,5 mm Länge.

> > ABLAZE®

 Cooltec: Kühlt die Spitze des Handstücks und bewahrt die Hautoberfläche vor Überhitzung.

• **3Density:** Moduliert automatisch die Feldfrequenz , um die Eindringtiefe der Wärmeenergie in die Haut zu variieren von 300 kHz bis 1 mHz.

 Propatch: Einwegpflaster mit Kochsalzlösung, das eine gleichmäßige Wärmeabgabe garantiert, wodurch das Risiko von oberflächlichen Blasen beseitigt wird.

• EndoShape: Stimulation der Zellen durch einstellbaren rhythmischen Sog der das Eindringen der HF Energie erleichtert.

VACULASE®

• Phase1: Tiefe Laser Stimulation
Die Laserdioden reaktivieren und
verstärken die arterielle, venöse und
lymphatische MikrozirkulationFörderung der Neoangiogenese
der intradermalen Schiffe.
Die Energie des Laserlichts
hat auch positive Effekte auf die
Fibroblastenaktivität.

• Phase3: Lipomassage

Die rhythmische Aspirationsmassage regt die Lymphdrainage und die Gewebestimulation an und fördert die Wiederherstellung der normalen Kollagen Elastizitätsspannung der Haut.

Ablaze®: Die Kryo Radiofrequenz, die die Haut sicher remodelliert.

3Density®: Der dreidimensionale Ansatz, um der Hautalterung entgegenzuwirken.

EndoShape®: Zug und Gewebe Biostimulation.

COaxmed

Maximieren Sie die Investition bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten.

Das neue **Coaxmed ONE** ist eine vielseitige Plattform, die Behandlungen bietet für mehrere Anwendungen, ohne in mehrere Systeme zu investieren.

Das modulare Design bietet mehrere unterschiedliche medizinische und kosmetische Lösungen , die alle in einer kompakten Einheit integriert sind.

Mit Coaxmed ONE können verschiedene Technologien erworben und in das Gerät zu verschiedenen Zeiten integriert werden, was unseren Kunden Vielseitigkeit und Komfort bietet.

Coaxmed ONE bietet ultimative Flexibilität für die Behandlung einer Vielzahl von patientenbedürftigen Verfahren. Die modularen Applikatoren des Systems sind so konzipiert, dass sie effektive und zuverlässige Ergebnisse bei minimalen Beschwerden des Patienten und minimaler Ausfallzeit bieten Kein einzelnes Gerät kann mehr als das Coaxmed ONE.



Behandlugsindikationen.

MEDICAL

• EFP (Ödematös Fibrosklerotische Pannikulopathie)

NO MEDICAL

- · Fettbehandlung.
- · Hebebehandlung.
- · Dehnungsstreifen Protokoll.
- Protokoll zur Hautalterung
- · Akne Protokoll.
- Behandlung des Brustkorbs
- · Hautreparaturbehandlung.
- · Behandlung mit Lymphdrainage
- · Remodellierungsbehandlung (Kontur).
- Protokoll der kutanen und muskulären Laxität
- Behandlung zur Reduzierung der Hauterschlaffung.







Vorher (kryoliposkulptur) 60 Tage nach/1 Sitzung

1



30 Tage nach/ 4 Sitzungen







Vorher (Duoshape)

60 Tage nach/ 4 Sitzungen

Vorher (Duoshape)

60 Tage nach/ 4 Sitzungen







Vorher (Ablaze)



Vorher (Skintite)

20 Tage nach/ 8 Sitzungen

30 Tage nach/ 4 Sitzungen

biotec italia

VIDEO TUTORIAL

coaxmed

Synchronisation von klinischen Anwendungen durch die Verschmelzung verschiedener Technologien.



COaxmed

TECHNISCHE DATEN

VERSORGUNGSS PANNUNG	240 Vac 50/60 Hz
MAX LEISTUNG	450 VA
SICHERUNGEN	2 x F4A 250 V
MAX VACUUM	66.6 kPa
MINIMALE KRYO TEMPERATUR	-10°
KLASSE UND TYP	IBF
RISIKOKLASSIFIZIERUNG NACH 93 42 / EEC	Klasse IIb
ABMESSUNGEN	680 x 470 x 1400 mm
MAX. GEWICHT MIT APPLIKATOREN	63 kg

ULTRASOUND

FREQUENZ	28 kHz
MAX LEISTUNG	35 W
OPERATIVMODUS	Kontinuierlich und gepulst
AKTIVIERUNG	Fußschalter

VACULASE

NR. DES DIODENLASERS	4
WELLENLÄNGE	8 vnm ± 5
AUSGANGSLEISTUNG CW PRO DIODE	1W

CRYOLIPOLYSIS WITH SUCTION

MINIMALE TEMPERATUR	-10°C
MAX SUCTION	66.6 kPa
OPERATIVMODUS	Kontinuierlich
ACTIVATION	Touchscreen Taste

GESICHTSRADIOFREQUENZ

FUNKTION	Bipolar/Monopolar
FREQUENZ	Von 300 kHz bis 1000 kHz
WELLENLÄNGE	Amplitudenmoduliertes Signal
MAX LEISTUNG	100 W
BETRIEBSART	Kontinuierlich und gepulst
AKTIVIERUNG	Fußschalter

KÖRPERRADIOFREQUENZ

FUNKTION	Bipolar/Monopolar
FREQUENZ	Von 300 kHz bis 1000 kHz
WELLENLÄNGE	Amplitudenmoduliertes Signal
MAX LEISTUNG	130 W
BETRIEBSART	Kontinuierlich und gepulst
AKTIVIERUNG	Fußschalter

KÖRPERANWENDUNGSGERÄTE





VACULASE



GESICHTSAPPLIKATOREN



EINE SOLIDE FIRMA

Mit über 25 Jahren Erfahrung ist Biotec Italia ein anerkannter Entwickler und Hersteller von Lasern, elektronischen, mechanischen und pneumatischen Technologien für die medizinische und ästhetische Industrie. Der Sitz befindet sich in Vicenza, Norditalien, und mit einer Niederlassung in London, Vereinigtes Königreich, Biotec Italia exportiert in über 50 Länder weltweit und bietet seinen Kunden ein internationales Service und Vertriebsnetz.

100% HERGESTELLT IN ITALIEN

Italy's Innovation und Fachwissen, hält Biotec Italia eine und strebt nach unübertroffener Exzellenz und Zuverlässigkeit in der Herstellung, um Kunden und Handelspartnern qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern . Um dieses Ziel zu erreichen, sichert Biotec Italia "totale Kundenzufriedenheit" zu.

VON DER IDEE ZUM FERTIGEN PRODUKT

Mit einer engagierten F&E Struktur, mehreren angemeldeten Patenten und die Kombination von italienischer Kompetenz und Kreativität in den Design und Montageprozessen, treibt Biotec Italia den ständigen Wandel voran, der Fortschritt erzeugt. Das geistige Vermögen vom Unternehmen sind der Schlüssel für innovative Technologien und fortschrittliche Produktionsmethoden für eine Vielzahl von medizinischen und ästhetischen Anwendungen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND QUALITÄTSSTANDARDS

Um seine Qualität zu zertifizieren, hält sich Biotec Italia an die ISO 13485 Fertigungspolitik des Unternehmens und Bureau Veritas enge Verbindung mit der Tradition seines Territoriums Produkt Sicherheit und Qualität Zertifizierungszeichen, das garantiert, dass die Produkte die geltenden Sicherheitsanforderungen und Qualitätsstandards erfüllen Kunden können sicher sein, dass sie ein sicheres Produkt kaufen, das untersucht wurde nach besonderen Sicherheitsanforderungen durch einen akkreditierten Dritten und wird durch regelmäßige Überwachungsaudits. surveillance audits kontrolliert.



Medical

BIOTEC ITALIA S.R.L.

ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA) VIALE DELLA REPUBBLICA 20 **T** +39 0444 59 16 83 **F** +39 0444 36 10 32

> **W** BIOTECITALIA.COM **E** INFO@BIOTECITALIA.COM

> > ☑ f in









